


stella



Stella 套装软件蓝牙 安装与使用指南

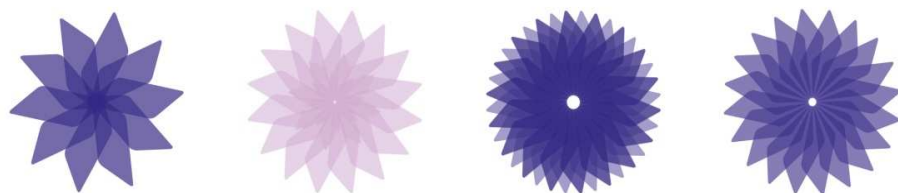

2.2 版本

© 2010 年版权所有 Stella Performance 有限公司

Stella 套装软件



蓝牙安装与使用指南



目录

1. 在 Stella5 IQ 上启动蓝牙	3
2. 蓝牙链接	4
3. 决定端口号码	6
4. 设置 Stella 套装软件	7
5. 产品支持服务	8

1. 在 Stella5 IQ 上启动蓝牙

连接蓝牙

1.1. 操作员按下“打开”按钮一段时间来激活 Stella 系统

.注：这最初的延迟是为了不让“打开”按钮上的电子干扰以及意外接触造成 Stella 系统的无意激活。

1.2. 显示屏将发亮，并显示“Stella”徽标；

“Stella”图形徽标




1.3. 徽标将持续 1 秒钟。

在此期间，操作员必须第二次按“打开”按钮，以激活蓝牙下载模式。

1.4. 声音- 滴滴声


1.5. 显示出以下图形，表示蓝牙下载模式已准备好。

图形图标 - 蓝牙模式已准备好

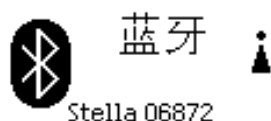

1.6. 蓝牙收音机组件现已激活，随时准备链接到个人电脑。

蓝牙链接已经连接到个人电脑

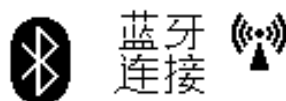


用手提电脑或个人电脑进行通讯链接时，右手边的收音机图标将如所显示的那样活动。

2. 蓝牙链接

2.1. 选择“开始”按钮。


2.2. 从开始菜单上选择开始菜单右侧的“控制面板”。

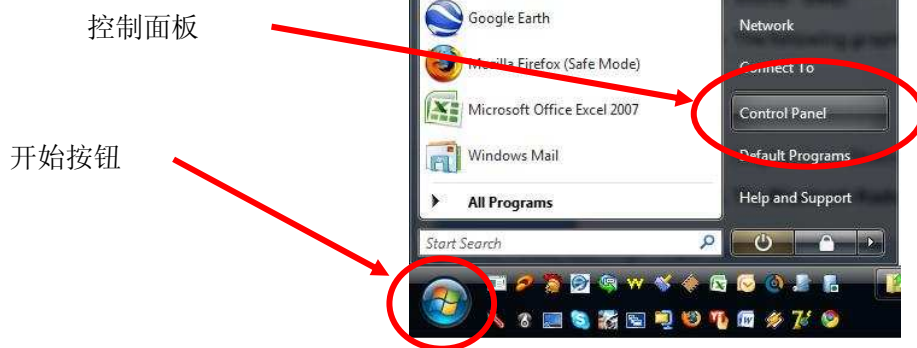

2.3. 控制面板将打开。

2.4. 双击蓝牙图标。

蓝牙图标

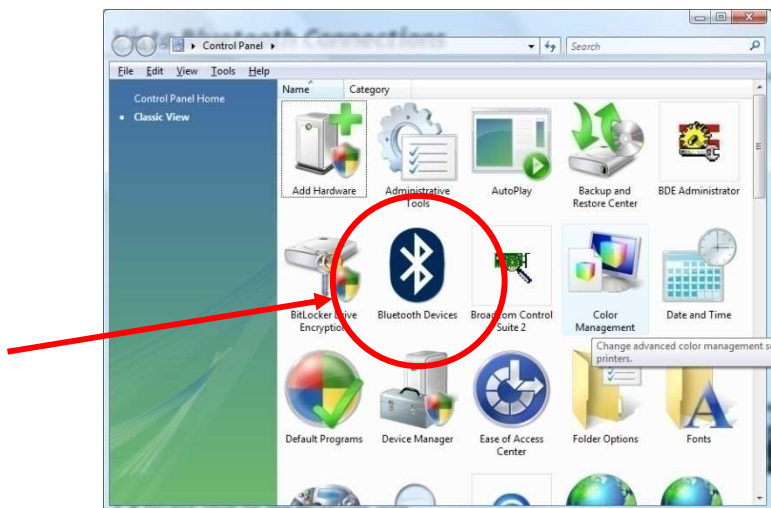


2.5. 按设备标签下的“添加”按钮。

2.6. 在以下屏幕上的“我的设备已经设置，随时会被发现”的打勾框上打勾。

2.7. 按“下一步”按钮。

电脑将自动开始搜索所有可用的蓝牙设备。

如果未发现 Stella5 IQ，要确保 Stella5 IQ 仍是打开的，并按“再次搜索”按钮。

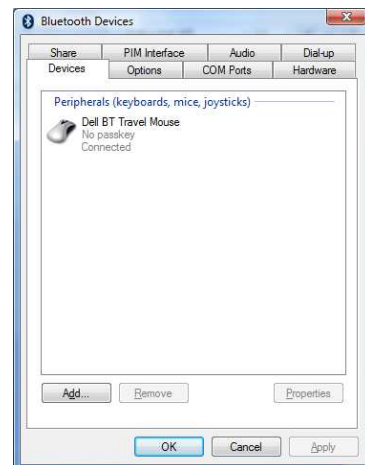

2.8. 一旦设备显示出来，要么点击“Stella”图标，并按“下一步”按钮，要么双击“Stella”图标来安装该机器。



2.9. 电脑现在将要求一个通行密匙。

2.10. 选“选择我自己的通行密匙”。

2.11. 在框中打“1234”。

2.12. 按“下一步”按钮。

2.13. 电脑将安装 Stella5 IQ 连接。



2.14. 记下“出站 COM 端口号码”

2.15. 按“结束”按钮。

在本例子中，出站 COM
端口是 COM 4




3. 决定端口号码

3.1. 按照本文件 2.1 到 2.1 步骤做。

3.2. 点击 Stella5 IQ 图标，然后点击“特性”。

3.3. 选择“服务”或“设备”标签，COM 端口显示在名单中。

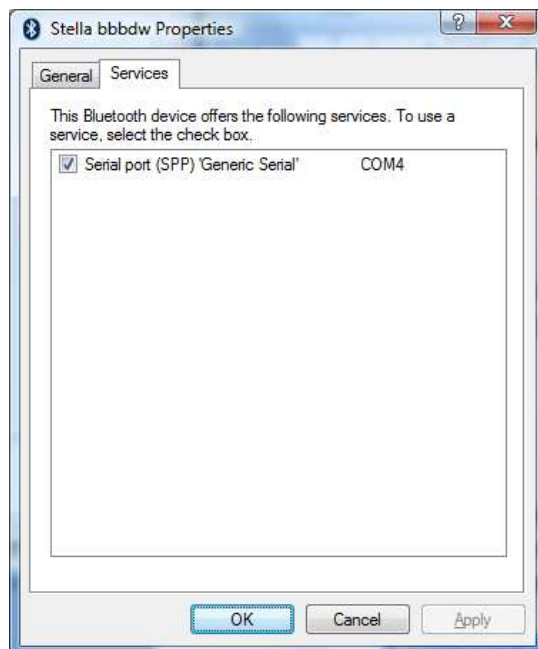

4. 设置 Stella 套装软件

蓝牙


这使得用户可以在需要的时候人工配置 Stella 套装软件蓝牙通讯端口。

在“使用蓝牙”选项打勾，进行无线电收音机链接下载。

参阅你的蓝牙使用手册，了解如何创建一个从个人电脑到 Stella5 IQ 的蓝牙通讯链接。

在搜索 Stella5 IQ 蓝牙链接时将出现一个 COM 端口。

请在 COM 端口名单中选择蓝牙 COM 端口号码。

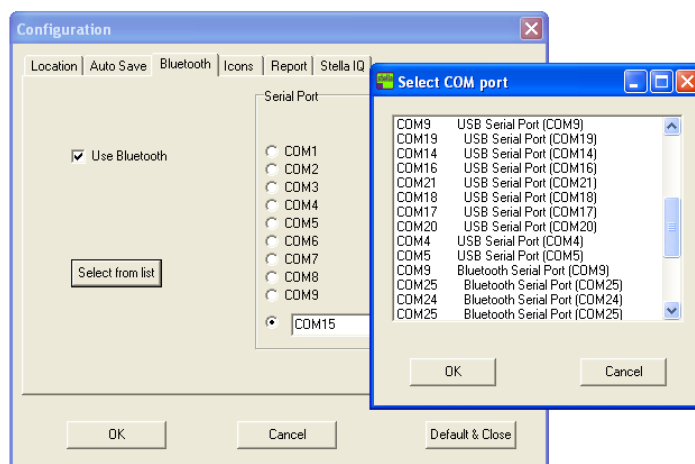

4.1. 打开 Stella 套装软件，并选择“文件 – 配置”

4.2. 选择“蓝牙”标签。

4.3. 选择作为 Stella IQ 设置对象的 COM 端口。

在以上的例子里，我们使用了“COM4”

4.4. 点击“使用蓝牙”框。

4.5. 点击“可以”。



4.6. 按“下载”按钮，进行下载。

5. 产品支持服务

请注意，如果您对于本产品的操作有任何问题，在作任何进一步询问之前，请先仔细阅读本安装使用指南。

欲得到本产品或其它产品的更多信息，请联系：

Stella Performance 有限公司办事处

新西兰

PO Box 4276
Mt Maunganui 3149,
New Zealand.
电话: +64 (7) 575 3730
传真: +64 (7) 575 3760
电邮: info@stella-performance.com
网址: www.stella-performance.com

中国

Shanghai Stella Medical Equipment Co.Ltd
Rm, 19, 24th Floor, 227 Zun Yi Road
Changning District
Shanghai
China.

中国上海市长宁区遵义路 227 号 24 楼 19 室 上海斯黛拉医疗器材有限公司
电话: +86 (21) 325 02858
传真: +86 (21) 325 02858
电邮: info@stella-performance.com
网址: www.stella-performance.com

英国

Unit 1B, Lynx Business Park,
Fordham Road,
Snailwell, Cambridgeshire,
CB8 7NY, UK
电话: +44 (0)1638 721500
传真: +44 (0)1638 721911
电邮: info@stella-performance.com
网址: www.stella-performance.com

手册版本

日期	版本	作者	修改	检查	批准
2010 年 5 月 5 日	2.2	B KENT	Corrected Document Version, added contact details for China	BK	JB
2010 年 4 月 1 日	1.3	B KENT	删除 Vista 的参考，以及拼写修改	BK	JB
2009 年 4 月 3 日	1.2	B KENT	修改联系方式、首页、Meta Normal-Roman 字体	JB	AH

STADC207